

BORK




Индикация POWER

- ☐ Устройство включено
- Нагрев
- Охлаждение
- ▬ Низкий уровень заряда

Индикация ION/EMS

- ☐ Режим EMS
- ION-насыщение
- ION-проникание

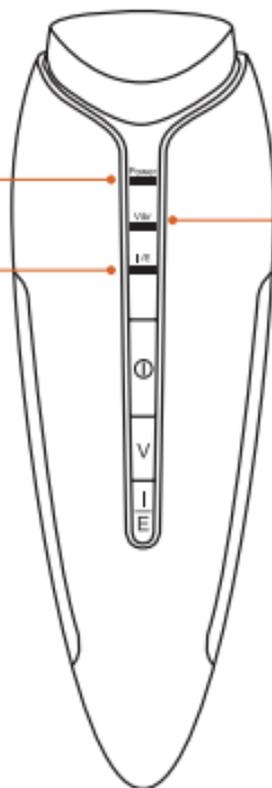

Индикация вибрации

- ☐ Вибрация включена

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте прибор из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.

Не оставляйте устройство заряжаться при полностью заряженной батарее: это может сократить срок службы аккумулятора.

Время зарядки — около 3–4 часов.

Время работы от одного заряда — около 70 минут.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Подключите кабель питания к разъему для зарядки в зарядной станции, затем подключите кабель питания к адаптеру и к источнику питания.
- Поместите прибор на зарядную станцию.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 2 секунд. Если индикация питания горит белым, устройство готово к работе.
- Для выключения устройства повторно нажмите и удерживайте кнопку ①.

Устройство автоматически выключится, если оно не используется в течение 3 минут.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Предварительно увлажните внутренний участок руки мокрым полотенцем.
- Зафиксируйте хлопковую салфетку на активной поверхности прибора при помощи колпачка для фиксации.
- Смочите салфетку тонером, включите режим нагрева и начните делать круговые движения по внутренней стороне руки на протяжении 10 секунд.

Через 48 часов проверьте обработанный участок кожи. В случае признаков раздражения прекратите использование прибора.

Используйте устройство только на участках кожи без макияжа и прочих наносимых на кожу средств.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выберите один из режимов в соответствии с необходимым типом ухода.

Тип ухода	Комбинация режимов	Метод использования	Цикл
Увлажнение	нагрев + вибрация + ION-насыщение	хлопковые салфетки + тонер	3 минуты в день
Питание	нагрев + вибрация + ION-проникание	хлопковые салфетки + тонер/эссенция/маска	3 минуты в день
Улучшение текстуры кожи	охлаждение	прямой контакт с кожей	4 минуты в день
Область глаз	нагрев + вибрация > охлаждение + вибрация	прямой контакт с кожей + сыворотка/крем/ маска для глаз	7 минут в день
Лифтинг	EMS/EMS + нагрев	тонер	3–7 минут 1–2 раза в неделю



УВЛАЖНЕНИЕ

Настройка режима:

Power — режим нагрева

Vibr — вибрация включена

I/E — ION-насыщение

- Зафиксируйте хлопковую салфетку на активной поверхности и нанесите тонер. Эффект будет сильнее, если включить режим ION-насыщения.
- Для корректной работы ION-режимов между рукой и боковыми панелями должен быть контакт.
- Совершайте движения, как показано на рисунке.
- Не обрабатывайте одно и то же место более 5 секунд подряд. Избегайте зоны вокруг глаз.

После 3 минут в режиме нагрева устройство автоматически переходит в режим охлаждения.

После 7 минут ION-терапии и вибрации устройство отключается автоматически.



ПИТАНИЕ

Настройка режима:

Power — режим нагрева

Vibr — вибрация включена

I/E — ION-насыщение

Лосьон, эссенцию или крем можно наносить как сразу на лицо, так и на хлопковую салфетку. При нанесенной маске для лица устройство можно использовать без хлопковой салфетки.

- Для корректной работы ION-режимов возьмите устройство так, чтобы между рукой и боковыми панелями был контакт.
- Совершайте движения, как показано на рисунке.
- Не обрабатывайте одно и то же место более 5 секунд подряд. Избегайте зоны вокруг глаз.



УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ

Настройка режима:

Power — режим нагрева

- Совершайте движения, как показано на рисунке.
- Не обрабатывайте одно и то же место более 5 секунд подряд. Избегайте зоны вокруг глаз.

После 4 минут в режиме охлаждения устройство автоматически переходит в режим ожидания.

Температура нагрева/охлаждения может незначительно отличаться, в зависимости от температуры окружающей среды, уровня заряда батареи и длительности непрерывного использования.



ОБЛАСТЬ ГЛАЗ

Настройка режима:

Power — режим охлаждения

Vibr — вибрация включена

- Обрабатывайте зоны, изображенные на рисунке.
- Не используйте прибор в области век.

После 3 минут в режиме нагрева и вибрации устройство автоматически переключится в режим охлаждения и вибрации еще на 4 минуты, после чего перейдет в режим ожидания.



ЛИФТИНГ

Настройка режима:

Power — режим нагрева

Vibr — вибрация включена

I/E — EMS

- Для корректной работы EMS-режимов возьмите устройство так, чтобы между рукой и боковыми панелями был контакт.
- Не допускайте высыхания хлопковой салфетки.
- Пропитывайте салфетку используемым средством по необходимости. Не используйте косметические средства высокой плотности.
- Обрабатывайте зоны, изображенные на рисунке.

После 3 минут в режиме нагрева устройство автоматически переходит в режим охлаждения. После 7 минут в режиме EMS устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

Перед хранением прибора убедитесь, что на приборе и зарядной станции нет остатков макияжа или иных загрязнений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только после консультации с врачом.
- Не рекомендуется использовать прибор людям с заболеваниями кожи.
- Прибор имеет защиту от водяных брызг, но не является водонепроницаемым, не погружайте прибор и шнур в воду или иную жидкость.
- После распаковки прибора проверьте его состояние. Убедитесь в том, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
- Не роняйте и не оказывайте чрезмерного физического давления на корпус устройства или отдельные его части.

- Не используйте прибор, если он имеет повреждения.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Используйте только шнур питания, идущий в комплекте с устройством.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При нерегулярном использовании рекомендуется заряжать прибор каждые 3 месяца.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер

Напряжение на входе: 100–240 В \approx 0,2 А

Частота: 50/60 Гц

Напряжение на выходе: 5 В \approx 1,0 А

Зарядная станция

Напряжение: 5 В \approx 1,0 А

Вес: 65 г

Прибор

Напряжение: 5 В \approx 1,0 А

Мощность: 3,5 Вт

Объем аккумулятора: 1000 мА·ч

Время зарядки: 3–4 часа

Габариты (В × Ш × Г): 50 × 153 × 60 мм

Вес: 150 г

Сделано в Китае.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система ухода за кожей: 1 шт.

Зарядная станция: 1 шт.

Адаптер: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Фиксирующий колпачок: 2 шт.

Хлопковые салфетки: 10 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Изделие	СИСТЕМА УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Модель	D688
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....
М. П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ.

При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

